

Bauseitige Installationsvorgaben für BP100 HE/HSE



- ① Warmwasseranschluss
 - Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (500 kPa)
 - Warmwassertemperatur min. 50°C max. 60°C
- ② Kaltwasseranschluss
 - Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (500 kPa)
 - Kaltwassertemperatur min. 5°C max. 15°C
- ③ Schmutzwasserablauf
 - 1 x HT-Abflussrohr mit Muffe DN/OD 110
 - wahlweise Wand- oder Bodenbündig

- ④ Elektroanschluss für Geräte mit 3000 Watt Leistung
 - Feuchtraum-Steckdose 230 Volt 50 Hz 1F 16A
 - Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich (1 x 4 mm²)

Vorabsperrung für KW und WW nach DVGW. Es sind unbedingt die Installationsvorschriften der zuständigen EVU und die entsprechenden VDE Richtlinien zu beachten.

Alle Maßangaben in Millimeter - Maßstab Frei auf DIN A4

Datum: 01.08.2013			Zeichnungs-Nr.: BP100 HE/HSE		Projekt: Steckbeckenreinigungsautomat		Maßstab: Frei DIN A4	
gezeichnet: Henz			Benennung:		technische Angaben und bauseitige Installationsvorgaben für Steckbeckenreinigungsautomat BP100 HE / HSE			
Revision	Datum	Kurz.	Rev. 0		Blatt 1 von 1		HORCHER Medical Systems	
.	.	.					61130 Nidderau Tel. 06187 / 9204-0	

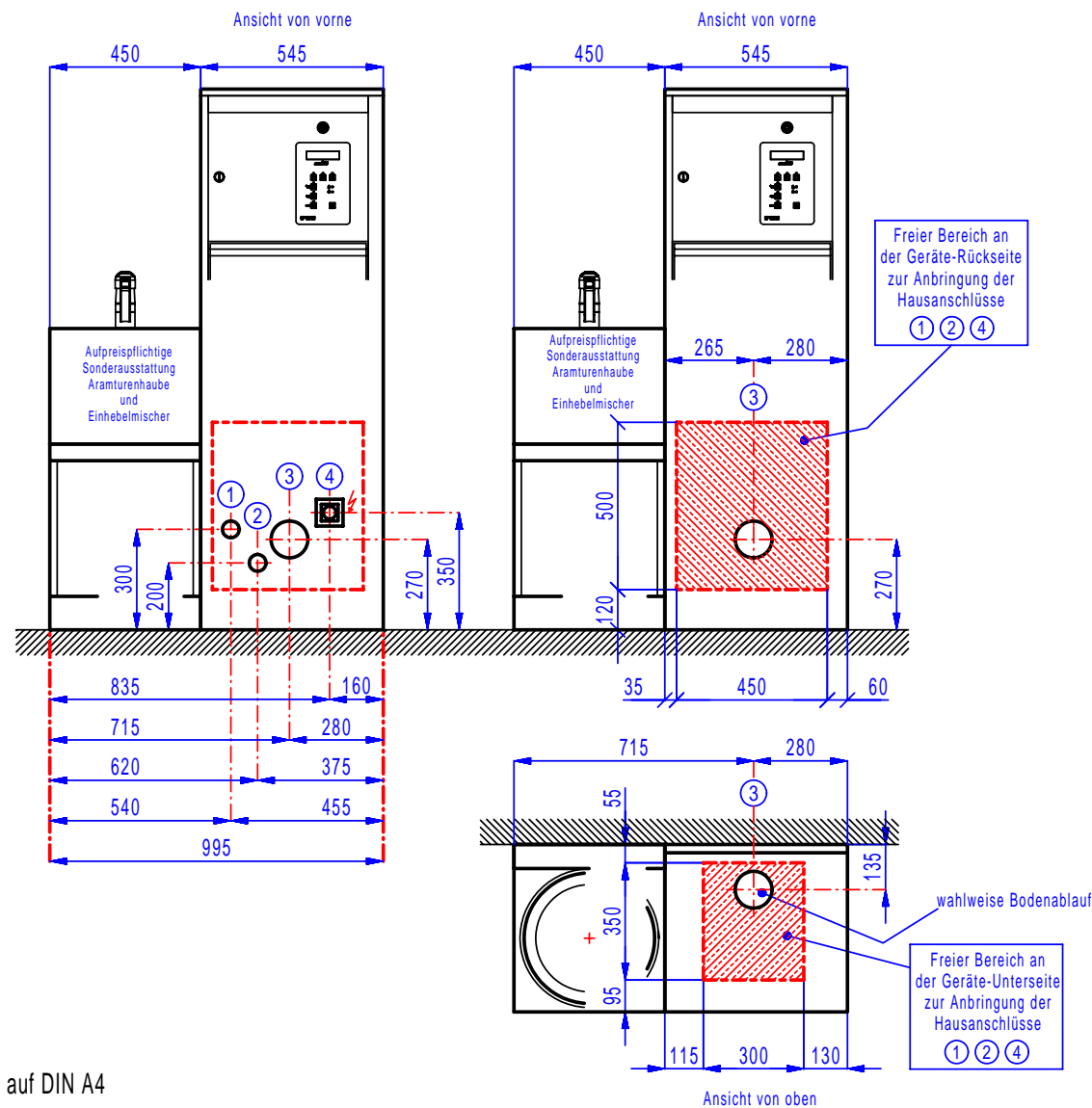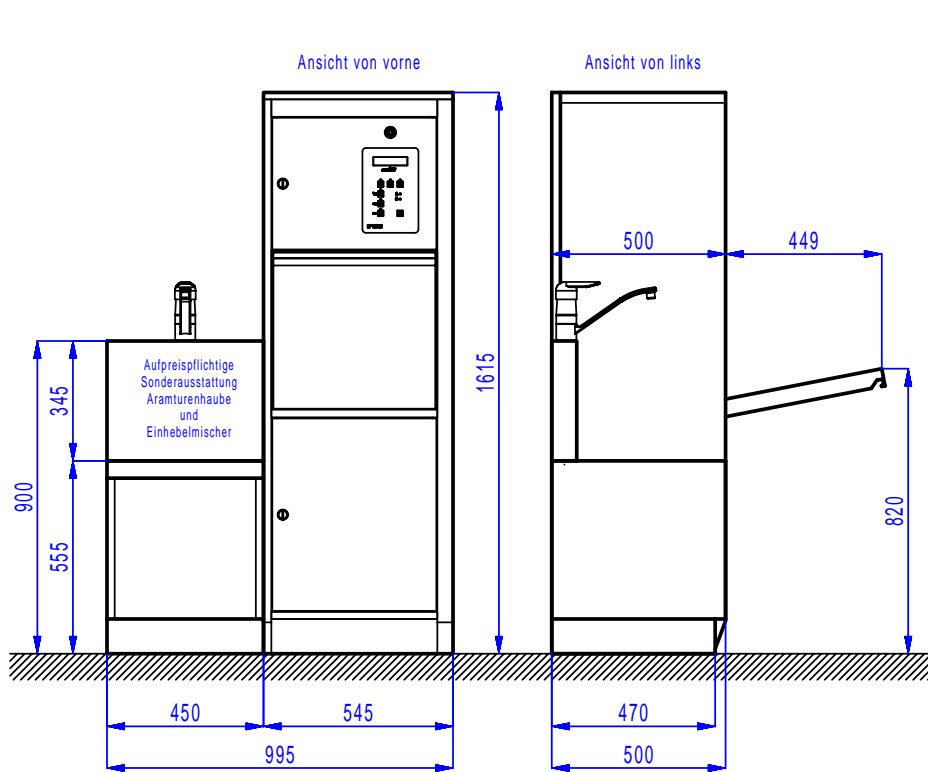

Bauseitige Installationsvorgaben für BP100 HE/HSE

- ① Warmwasseranschluss
- Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (500 kPa)
 - Warmwassertemperatur min. 50°C max. 60°C

- ② Kaltwasseranschluss
- Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (500 kPa)
 - Kaltwassertemperatur min. 5°C max. 15°C



- ③ Schmutzwasserablauf
- 1 x HT-Abflussrohr mit Muffe DN/OD 110
 - wahlweise Wand- oder Bodenbündig

- ④ Elektroanschluss für Geräte mit 3000 Watt Leistung
- Feuchtraum-Steckdose 230 Volt 50 Hz 1F 16A
 - Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich (1 x 4 mm²)

Vorabsperrung für KW und WW nach DVGW. Es sind unbedingt die Installationsvorschriften der zuständigen EVU und die entsprechenden VDE Richtlinien zu beachten.

Alle Maßangaben in Millimeter - Maßstab Frei auf DIN A4

Datum: 01.08.2013			Zeichnungs-Nr.:		Projekt:		Maßstab: Frei DIN A4	
gezeichnet: Henz			BP100 HE/HSE mit Ag links		Steckbeckenreinigungsautomat			
Revision	Datum	Kurzz.	Benennung:					
Rev. 1	.	.	technische Angaben und bauseitige Installationsvorgaben für Steckbeckenreinigungsautomat BP100 HE/HSE mit Ausguss links					
.	.	.	Rev. 0		Blatt 1 von 1		HORCHER Medical Systems	
.	.	.			61130 Nidderau		Tel. 06187 / 9204-0	

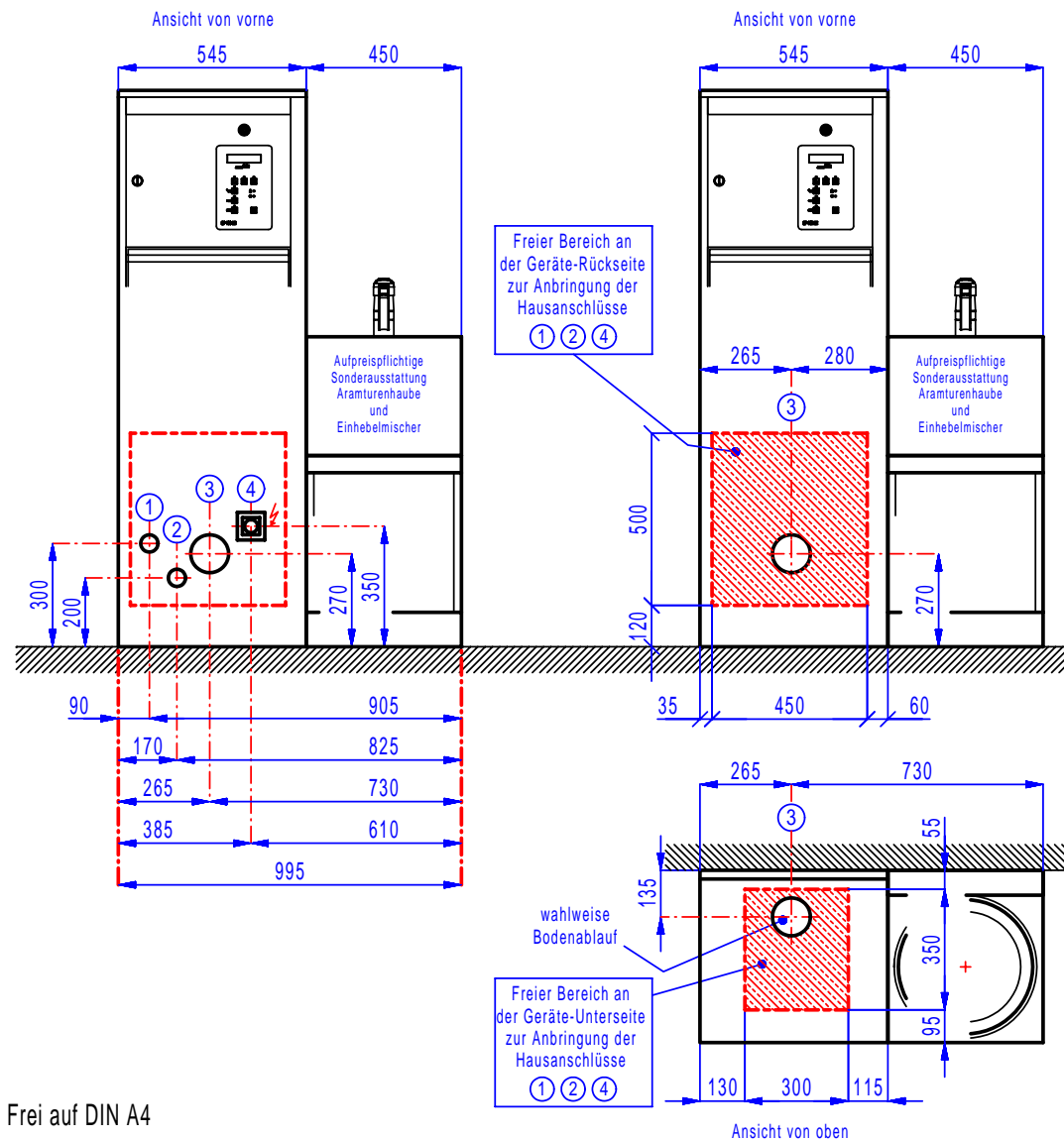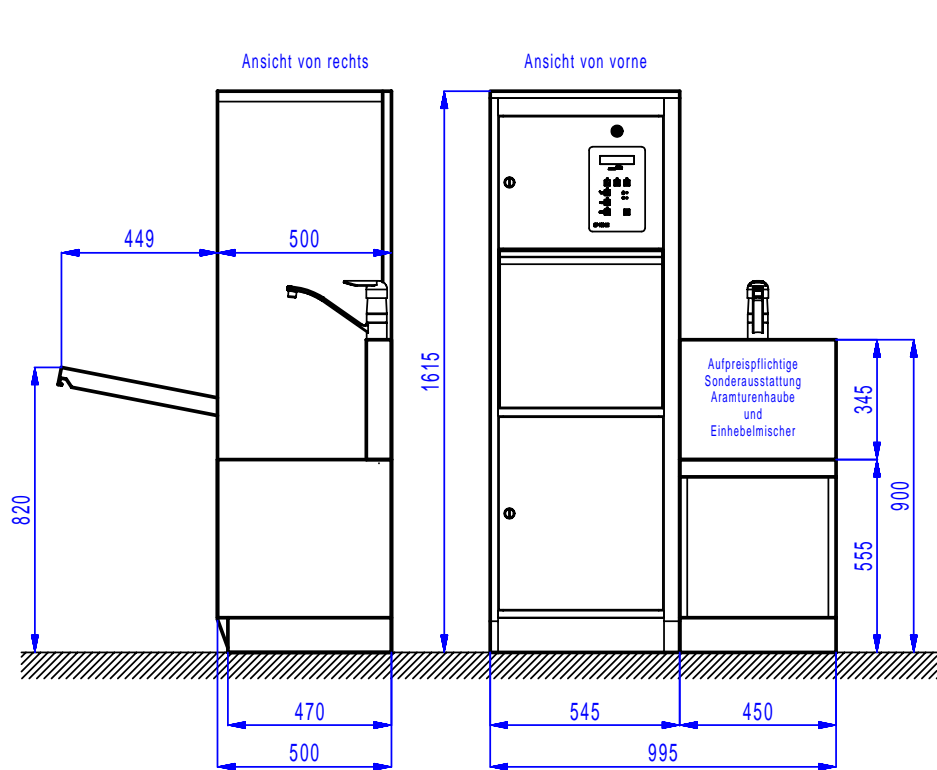

Bauseitige Installationsvorgaben für BP100 HE/HSE

- ① Warmwasseranschluss
 - Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (50 0kPa)
 - Warmwassertemperatur min. 50°C max. 60°C

- ② Kaltwasseranschluss
 - Zuleitung DN 20 - Durchflussleistung mit min. 25 Liter/Minute
 - Absperrventil, Abgang mit 3/4" Aussengewinde
 - Druckbereich min. 2 bar (200 kPa) max. 5 bar (500kPa)
 - Kaltwassertemperatur min. 5°C max. 15°C

- ③ Schmutzwasserablauf
 - 1 x HT-Abflussrohr mit Muffe DN/OD 110
 wahlweise Wand- oder Bodenbündig

- ④ Elektroanschluss für Geräte mit 3000 Watt Leistung
 - Feuchtraum-Steckdose 230 Volt 50 Hz 1F 16A
 - Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich (1 x 4 mm²)

Vorabsperrung für KW und WW nach DVGW. Es sind unbedingt die Installationsvorschriften der zuständigen EVU und die entsprechenden VDE Richtlinien zu beachten.

Alle Maßangaben in Millimeter - Maßstab Frei auf DIN A4

Datum: 01.08.2013			Zeichnungs-Nr.:		Projekt:	
gezeichnet: Henz			BP100 HE/HSE mit Ag rechts		Maßstab: Frei DIN A4	
Revision	Datum	Kurzz.	Benennung:			
Rev. 1	.	.	Steckbeckenreinigungsautomat			
.	.	.	technische Angaben und bauseitige Installationsvorgaben			
.	.	.	für Steckbeckenreinigungsautomat BP100 HE/HSE mit Ausguss rechts			
.	.	.	Rev. 0		Blatt 1 von 1	
.	.	.			HORCHER Medical Systems	
					81130 Nidderau Tel. 06187 / 9204-0	